


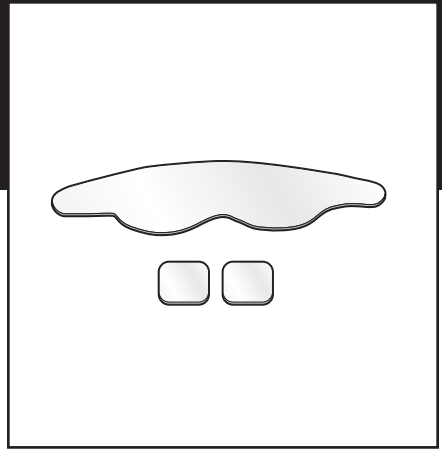





## NEONATAL EYE COVER WITH TABS

	<b>DO NOT REUSE</b>
	<b>NON-STERILE</b>
	<b>NOT MADE WITH NATURAL RUBBER LATEX</b>
<b>RX ONLY</b>	<b>FEDERAL U.S.A. LAW RESTRICTS THIS DEVICE TO SALE OR USE BY OR ON THE ORDER OF A PHYSICIAN OR PROPERLY LICENSED PRACTITIONER.</b>



### IMPORTANT INFORMATION

 Please read all instructions, warnings, and cautions before use. Correct application is essential for proper functioning of the product. Use only on the person it was provided to by a healthcare professional and only for the use it was intended.

### INTENDED USE

The DeRoyal® Neonatal Eye Cover with Tabs is intended to cover and protect the eyes of an infant during therapeutic procedures, such as phototherapy.

### WARNINGS

- Ensure the eye cover does not obstruct the infant's breathing through the nose or mouth.
- Securely position the eye cover, ensuring the eye cover covers the infant's eyes completely.
- Ensure eye cover does not interfere with any monitoring equipment or treatment of infant.

### CAUTIONS

- If skin irritation develops, discontinue use.
- This device is for single patient use only. It is not intended for disinfection and subsequent re-use, which may result in device failure and/or create the risk of contamination.
- This device has not been evaluated for reprocessing or re-sterilization. Reprocessing or re-sterilization may damage the device, rendering it unusable or may lead to device failure, which could result in patient illness, injury or death.

### DIRECTIONS FOR USE

1. Prep infant's skin with the alcohol pad provided.
2. Affix an acrylic tab to each side of the infant's head, between the ears and eyes. Secure firmly.
3. Center the eye cover over the bridge of the infant's nose, making sure both eyes are completely covered. The nose and mouth should be unobstructed.
4. If eye cover is removed temporarily, hook and loop tabs may be covered with cloth tabs.

### DISPOSAL

Dispose of any used device according to local, state, and federal laws and regulations. For safe disposal of devices, follow your facility's protocol.

### STORAGE AND TRANSPORT CONDITIONS

**DO NOT** store product at extreme temperatures or in a moist/damp environment.




	<b>KEEP DRY</b>
	<b>KEEP AWAY FROM SUNLIGHT</b>

In addition to the competent authority in the country where the patient resides, serious incidents must be reported to DeRoyal Industries, Inc.


### WARRANTY

DeRoyal® products are warranted for ninety (90) days from the date of shipment from deroyal as to product quality and workmanship. **DEROYAL'S WRITTEN WARRANTIES ARE GIVEN IN LIEU OF ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.**

# BANDEAU OCULAIRE POUR NOUVEAU-NÉS À LANGUETTES

	NE PAS RÉUTILISER
	NON STERILE
	NON FABRIQUE EN LATEX NATUREL
<b>SUR ORDONNANCE UNIQUEMENT</b>	<b>LA LOI FÉDÉRALE AMÉRICAINE EXIGE QUE LE PRÉSENT PRODUIT SOIT VENDU OU UTILISÉ PAR OU SUR PRÉSCRIPTION D'UN MÉDECIN OU D'UN PRATICIEN AGRÉÉ.</b>

## IMPORTANT INFORMATION

 Avant utilisation, lire l'ensemble des instructions, avertissements et précautions. Une bonne application garantit le bon fonctionnement du produit.

## USAGE PRÉVU

Le bandeau oculaire pour nouveau-nés à languettes de DeRoyal® sert à couvrir et protéger les yeux des nouveau-nés lors de procédures thérapeutiques, type photothérapie.

## AVERTISSEMENTS

- Vérifier que le bandeau oculaire n'empêche pas le nouveau-né de respirer ni par le nez ni par la bouche.
- Bien positionner le bandeau oculaire, en s'assurant que le bandeau recouvre complètement les yeux du nouveau-né.
- Vérifier que le bandeau oculaire ne gêne pas l'équipement qui surveille ou traite le nouveau-né.

## PRÉCAUTIONS

- Ne plus utiliser en cas d'irritation cutanée.
- Ce dispositif est à usage unique. Il n'est pas destiné à être désinfecté, puis réutilisé, ce qui risquerait de rendre le dispositif défectueux et/ou de créer un risque de contamination.
- Le retraitement et la restérilisation de ce dispositif n'ont pas été évalués. Le retraitement et/ou la restérilisation risquent d'endommager le dispositif, de le rendre inutilisable et/ou le rendre défectueux, faisant ainsi courir au patient un risque de maladie, blessure ou décès.

## INSTRUCTIONS D'UTILISATION

1. Préparer la peau du nouveau-né avec la compresse d'alcool fournie.
2. Coller une languette en acrylique de chaque côté de la tête du nouveau-né, entre les oreilles et les yeux. Bien fixer.
3. Centrer le bandeau oculaire sur l'arête du nez du nouveau-né, en vérifiant que les deux yeux sont complètement recouverts. Ne surtout pas recouvrir le nez et la bouche.
4. Si le bandeau oculaire est retiré temporairement, les languettes velcro peuvent être recouvertes de languettes en tissu.

## DESECHO

Deseche cualquier dispositivo utilizado conforme a las leyes y normativas locales, estatales y federales. Para una eliminación segura de los dispositivos, siga el protocolo que establezca su centro.

## CONDITIONS DE STOCKAGE ET DE TRANSPORT

Ne pas conserver le produit à des températures extrêmes, ni dans un environnement moite/humide.

	GARDER AU SEC
	TENIR À L'ABRI DE LA LUMIÈRE DU SOLEIL

Tout incident grave doit être signalé à l'autorité compétente du pays où réside le patient ainsi qu'à DeRoyal Industries, Inc.

## GARANTIE

Les produits DeRoyal offrent une garantie qualité et main-d'œuvre de quatre vingt dix (90) jours à compter de la date d'expédition par DeRoyal. **LES GARANTIES ÉCRITES DE DEROYAL REMPLACENT TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET DE CONFORMITÉ À UN USAGE ARTICULIER.**

 DeRoyal®



Manufactured by:  
DeRoyal Industries, Inc.  
200 DeBusk Lane  
Powell, TN 37849 USA  
888.938.7828 or (001) 865.938.7828  
[www.deroyal.com](http://www.deroyal.com)

**PART#45-00146 | REVISED 4/2026**

**©2026 DEROYAL INDUSTRIES, INC.**

All Rights Reserved. DeRoyal and the DeRoyal logo are trademarks or registered trademarks of DeRoyal Industries, Inc.