










Συνηθέστερα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

Γλωσσάρι των συνηθέστερων χρησιμοποιούμενων συμβόλων στις συσκευασίες και επιστημονικές ιατροτεχνολογικών προϊόντων της DeRoyal

σύμβολο	επεξηγηματικό κείμενο	πρότυπο αναφοράς	τίτλος προτύπου
 REF	Υποδηλώνει τον αριθμό καταλόγου του κατασκευαστή έτσι ώστε να μπορεί να προσδιοριστεί το ιατροτεχνολογικό προϊόν.	EN 980, Ενότητα 5.10	Ιατροτεχνολογικά προϊόντα – Σύμβολα που πρέπει να χρησιμοποιούνται με πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται από τον κατασκευαστή – Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις.
		ISO 15223-1, Ενότητα 5.1.6	Ιατροτεχνολογικά προϊόντα — Σύμβολα που πρέπει να χρησιμοποιούνται με τις ετικέτες ιατροτεχνολογικών προϊόντων και πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται.
		ISO 7000- 2493	Γραφικά σύμβολα για χρήση σε εξοπλισμό.
Αριθμός καταλόγου ή μοντέλου			
 LOT	Υποδηλώνει τον κωδικό παρτίδας του κατασκευαστή έτσι ώστε να μπορεί να προσδιοριστεί η παρτίδα ή το φορτίο.	EN 980, Ενότητα 5.4	Ιατροτεχνολογικά προϊόντα – Σύμβολα που πρέπει να χρησιμοποιούνται με πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται από τον κατασκευαστή – Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις.
		ISO 15223-1, Ενότητα 5.1.5	Ιατροτεχνολογικά προϊόντα — Σύμβολα που πρέπει να χρησιμοποιούνται με τις ετικέτες ιατροτεχνολογικών προϊόντων και πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται.
		ISO 7000-2492	Γραφικά σύμβολα για χρήση σε εξοπλισμό.
Κωδικός παρτίδας			
 SN	Υποδηλώνει τον αριθμό σειράς του κατασκευαστή έτσι ώστε να προσδιοριστεί ένα συγκεκριμένο ιατροτεχνολογικό προϊόν.	EN 980, Ενότητα 5.5	Ιατροτεχνολογικά προϊόντα – Σύμβολα που πρέπει να χρησιμοποιούνται με πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται από τον κατασκευαστή – Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις.
		ISO 15223-1, Ενότητα 5.1.7	Ιατροτεχνολογικά προϊόντα — Σύμβολα που πρέπει να χρησιμοποιούνται με τις ετικέτες ιατροτεχνολογικών προϊόντων και πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται.
		ISO 7000-2498	Γραφικά σύμβολα για χρήση σε εξοπλισμό.
Αριθμός σειράς			
	Υποδηλώνει ιατροτεχνολογικό προϊόν το οποίο χρειάζεται να προστατευτεί από την υγρασία.	EN 980, Ενότητα 5.21	Ιατροτεχνολογικά προϊόντα – Σύμβολα που πρέπει να χρησιμοποιούνται με πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται από τον κατασκευαστή – Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις.
		ISO 15223-1, Ενότητα 5.3.4	Ιατροτεχνολογικά προϊόντα — Σύμβολα που πρέπει να χρησιμοποιούνται με τις ετικέτες ιατροτεχνολογικών προϊόντων και πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται.
		ISO 7000-0626	Γραφικά σύμβολα για χρήση σε εξοπλισμό.
Να διατηρείται στεγνό			
	Υποδηλώνει ιατροτεχνολογικό προϊόν το οποίο χρειάζεται προστασία από φωτεινές πηγές.	EN 980, Ενότητα 5.20	Ιατροτεχνολογικά προϊόντα – Σύμβολα που πρέπει να χρησιμοποιούνται με πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται από τον κατασκευαστή – Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις.
		ISO 15223-1, Ενότητα 53.2	Ιατροτεχνολογικά προϊόντα — Σύμβολα που πρέπει να χρησιμοποιούνται με τις ετικέτες ιατροτεχνολογικών προϊόντων και πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται.
		ISO 7000-0624	Γραφικά σύμβολα για χρήση σε εξοπλισμό.
Να διατηρείται μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία			
	Υποδηλώνει τον κατασκευαστή του ιατροτεχνολογικού προϊόντος.	EN 980, Ενότητα 5.12	Ιατροτεχνολογικά προϊόντα – Σύμβολα που πρέπει να χρησιμοποιούνται με πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται από τον κατασκευαστή – Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις.
		ISO 15223-1, Ενότητα 5.1.1	Ιατροτεχνολογικά προϊόντα — Σύμβολα που πρέπει να χρησιμοποιούνται με τις ετικέτες ιατροτεχνολογικών προϊόντων και πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται.
		ISO 7000-3082	Γραφικά σύμβολα για χρήση σε εξοπλισμό.
Κατασκευαστής			
	Υποδηλώνει την ημερομηνία κατασκευής του ιατροτεχνολογικού προϊόντος.	EN 980, Ενότητα 5.6	Ιατροτεχνολογικά προϊόντα – Σύμβολα που πρέπει να χρησιμοποιούνται με πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται από τον κατασκευαστή – Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις.
		ISO 15223-1, Ενότητα 5.1.3	Ιατροτεχνολογικά προϊόντα — Σύμβολα που πρέπει να χρησιμοποιούνται με τις ετικέτες ιατροτεχνολογικών προϊόντων και πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται.
		ISO 7000-2497	Γραφικά σύμβολα για χρήση σε εξοπλισμό.
Ημερομηνία κατασκευής			



Συνηθέστερα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

Γλωσσάρι των συνηθέστερων χρησιμοποιούμενων συμβόλων στις συσκευασίες και επισημάνσεις ιατροτεχνολογικών προϊόντων της DeRoyal

σύμβολο	επεξηγηματικό κείμενο	πρότυπο αναφοράς	τίτλος προτύπου
	Υποδηλώνει τον φορέα που ευθύνεται για τη διάθεση του ιατροτεχνολογικού προϊόντος στον τόπο προορισμού.	ISO 15223-1, Ενότητα 5.1.9	Ιατροτεχνολογικά προϊόντα – Σύμβολα που πρέπει να χρησιμοποιούνται με πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται από τον κατασκευαστή – Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις.
Διανομέας		ISO 7000-3724	Ιατροτεχνολογικά προϊόντα — Σύμβολα που πρέπει να χρησιμοποιούνται με τις ετικέτες ιατροτεχνολογικών προϊόντων και πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται.
Rx Only	Απαιτείται συνταγή στις Ηνωμένες Πολιτείες.	21 CFR 801.15(c)(1)(i)F	Επισήμανση-Ιατροτεχνολογικά προϊόντα- σπουδαιότητα των απαιτούμενων δηλώσεων ετικέτας.
Μόνο με ιατρική συνταγή		21 CFR 801.109	Επισήμανση-Προϊόντα κατόπιν ιατρικής συνταγής.
	Υποδηλώνει ιατροτεχνολογικό προϊόν το οποίο δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί αν έχει καταστραφεί ή ανοιχτεί η συσκευασία.	ISO 15223-1, Ενότητα 5.2.8	Ιατροτεχνολογικά προϊόντα — Σύμβολα που πρέπει να χρησιμοποιούνται με τις ετικέτες ιατροτεχνολογικών προϊόντων και πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται.
Να μη χρησιμοποιηθεί αν η συσκευασία έχει καταστραφεί		ISO 7000-2606	Γραφικά σύμβολα για χρήση σε εξοπλισμό.
	Υποδηλώνει την παρουσία φυσικού καουτσούκ ή λατέξ από φυσικό ξηρό καουτσούκ ως κατασκευαστικό υλικό εντός του ιατροτεχνολογικού προϊόντος ή της συσκευασίας ενός ιατροτεχνολογικού προϊόντος.	ISO 15223-1, Ενότητα 5.4.5	Ιατροτεχνολογικά προϊόντα – Σύμβολα που πρέπει να χρησιμοποιούνται με πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται από τον κατασκευαστή – Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις.
Περιέχει φυσικό καουτσούκ λατέξ			Ιατροτεχνολογικά προϊόντα — Σύμβολα που πρέπει να χρησιμοποιούνται με τις ετικέτες ιατροτεχνολογικών προϊόντων και πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται.
	Υποδηλώνει ότι τα υλικά κατασκευής του προϊόντος ή της συσκευασίας του δεν παρασκευάστηκαν από φυσικό καουτσούκ ή λατέξ από φυσικό ξηρό καουτσούκ.	ISO 15223-1, Ενότητα 5.4.5, Παραπέμπουμε στο Παράρτημα Β για το σύμβολο άρνησης	Ιατροτεχνολογικά προϊόντα – Σύμβολα που πρέπει να χρησιμοποιούνται με πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται από τον κατασκευαστή – Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις.
Δεν κατασκευάζεται με λατέξ από φυσικό καουτσούκ			Ιατροτεχνολογικά προϊόντα — Σύμβολα που πρέπει να χρησιμοποιούνται με τις ετικέτες ιατροτεχνολογικών προϊόντων και πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται.
	Υποδηλώνει την ημερομηνία μετά την οποία το ιατροτεχνολογικό προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται.	ISO 15223-1, Ενότητα 5.1.4	Ιατροτεχνολογικά προϊόντα – Σύμβολα που πρέπει να χρησιμοποιούνται με πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται από τον κατασκευαστή – Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις.
Ανάλωση έως		ISO 7000-2607	Ιατροτεχνολογικά προϊόντα — Σύμβολα που πρέπει να χρησιμοποιούνται με τις ετικέτες ιατροτεχνολογικών προϊόντων και πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται.
	Υποδηλώνει στον χρήστη την ανάγκη να ανατρέξει στις οδηγίες χρήσης.	ISO 15223-1, Ενότητα 5.4.3	Ιατροτεχνολογικά προϊόντα – Σύμβολα που πρέπει να χρησιμοποιούνται με πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται από τον κατασκευαστή – Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις.
Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης		IEC 60601-1, Πίνακας D.1, Σύμβολο 11	Ιατροτεχνολογικά προϊόντα — Σύμβολα που πρέπει να χρησιμοποιούνται με τις ετικέτες ιατροτεχνολογικών προϊόντων και πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται.
		ISO 7000-1641	Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές — Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις για βασική ασφάλεια και ουσιώδη επίδοση.
			Γραφικά σύμβολα για χρήση σε εξοπλισμό.
	Υποδηλώνει στον χρήστη την ανάγκη να ανατρέξει στις οδηγίες χρήσης για σημαντικές προειδοποιητικές πληροφορίες όπως προειδοποιήσεις και προφυλάξεις που δεν είναι δυνατό, για διάφορους λόγους, να βρίσκονται πάνω στο ίδιο το ιατροτεχνολογικό προϊόν.	ISO 15223-1, Ενότητα 5.4.4	Ιατροτεχνολογικά προϊόντα – Σύμβολα που πρέπει να χρησιμοποιούνται με πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται από τον κατασκευαστή – Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις.
Προσοχή		IEC 60601-1, Πίνακας D.1, Σύμβολο 10	Ιατροτεχνολογικά προϊόντα — Σύμβολα που πρέπει να χρησιμοποιούνται με τις ετικέτες ιατροτεχνολογικών προϊόντων και πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται.
			Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές — Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις για βασική ασφάλεια και ουσιώδη επίδοση.



Συνηθέστερα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

Γλωσσάρι των συνηθέστερων χρησιμοποιούμενων συμβόλων στις συσκευασίες και επισημάνσεις ιατροτεχνολογικών προϊόντων της DeRoyal

σύμβολο	επεξηγηματικό κείμενο	πρότυπο αναφοράς	τίτλος προτύπου
	Υποδηλώνει ιατροτεχνολογικό προϊόν το οποίο προορίζεται για μία χρήση ή για χρήση σε έναν μόνον ασθενή στο πλαίσιο μίας και μόνο διαδικασίας.	ISO 15223-1, Ενότητα 5.4.2	Ιατροτεχνολογικά προϊόντα – Σύμβολα που πρέπει να χρησιμοποιούνται με πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται από τον κατασκευαστή – Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις.
Να μην επαναχρησιμοποιείται		ISO 7000-1051	Ιατροτεχνολογικά προϊόντα — Σύμβολα που πρέπει να χρησιμοποιούνται με τις ετικέτες ιατροτεχνολογικών προϊόντων και πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται.
	Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο/φυλλάδιο οδηγιών.	IEC 60601-1, Πίνακας D.2, Σύμβολο 10	Γραφικά σύμβολα για χρήση σε εξοπλισμό.
Ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης			Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές — Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις για βασική ασφάλεια και ουσιώδη επίδοση.
	Σημαίνει Ευρωπαϊκή τεχνική συμμόρφωση.	765/2008/EK 768/2008/ EK MDD 93/42/EOK Άρθρα 4,11,12,17, Παράρτημα II)	Οι απαιτήσεις διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων· Οδηγία για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα.
Σήμανση CE			
	Σημαίνει τεχνική συμμόρφωση HB (Ηνωμένο Βασίλειο).	Κανονισμός 765/2008	Οι απαιτήσεις διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων.
Σήμανση UKCA			
	Υποδηλώνει τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα.	ISO 15223-1, Ενότητα 5.1.2	Ιατροτεχνολογικά προϊόντα – Σύμβολα που πρέπει να χρησιμοποιούνται με πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται από τον κατασκευαστή – Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις.
Εξουσιοδοτημένος ευρωπαϊκός αντιπρόσωπος			Ιατροτεχνολογικά προϊόντα — Σύμβολα που πρέπει να χρησιμοποιούνται με τις ετικέτες ιατροτεχνολογικών προϊόντων και πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται.
	Υποδηλώνει τα όρια θερμοκρασίας στα οποία μπορεί να εκτίθεται με ασφάλεια το ιατροτεχνολογικό προϊόν.	ISO 15223-1, Ενότητα 5.3.7	Ιατροτεχνολογικά προϊόντα – Σύμβολα που πρέπει να χρησιμοποιούνται με πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται από τον κατασκευαστή – Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις.
Εύρος θερμοκρασίας αποθήκευσης		ISO 7000-0632	Ιατροτεχνολογικά προϊόντα — Σύμβολα που πρέπει να χρησιμοποιούνται με τις ετικέτες ιατροτεχνολογικών προϊόντων και πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται.
	Υποδηλώνει το κατώτερο όριο θερμοκρασίας στο οποίο μπορεί να εκτίθεται με ασφάλεια το ιατροτεχνολογικό προϊόν.	ISO 15223-1, Ενότητα 5.3.5	Ιατροτεχνολογικά προϊόντα – Σύμβολα που πρέπει να χρησιμοποιούνται με πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται από τον κατασκευαστή – Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις.
Κατώτερο όριο θερμοκρασίας αποθήκευσης		ISO 7000-0534	Ιατροτεχνολογικά προϊόντα — Σύμβολα που πρέπει να χρησιμοποιούνται με τις ετικέτες ιατροτεχνολογικών προϊόντων και πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται.
	Υποδηλώνει το ανώτερο όριο θερμοκρασίας στο οποίο μπορεί να εκτίθεται με ασφάλεια το ιατροτεχνολογικό προϊόν.	ISO 15223-1, Ενότητα 5.3.6	Ιατροτεχνολογικά προϊόντα – Σύμβολα που πρέπει να χρησιμοποιούνται με πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται από τον κατασκευαστή – Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις.
Ανώτερο όριο θερμοκρασίας αποθήκευσης		ISO 7000-0533	Ιατροτεχνολογικά προϊόντα — Σύμβολα που πρέπει να χρησιμοποιούνται με τις ετικέτες ιατροτεχνολογικών προϊόντων και πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται.



Συνηθέστερα χρησιμοποιούμενα σύμβολα









Γλωσσάρι των συνηθέστερων χρησιμοποιούμενων συμβόλων στις συσκευασίες και επισημάνσεις ιατροτεχνολογικών προϊόντων της DeRoyal

σύμβολο	επεξηγηματικό κείμενο	πρότυπο αναφοράς	τίτλος προτύπου
	Υποδηλώνει το εύρος υγρασίας στο οποίο μπορεί να εκτίθεται με ασφάλεια το ιατροτεχνολογικό προϊόν.	ISO 15223-1, Ενότητα 5.3.8	Ιατροτεχνολογικά προϊόντα – Σύμβολα που πρέπει να χρησιμοποιούνται με πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται από τον κατασκευαστή – Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις.
Περιορισμός υγρασίας		ISO 7000-2620	Γραφικά σύμβολα για χρήση σε εξοπλισμό.
	Υποδηλώνει ιατροτεχνολογικό προϊόν το οποίο δεν πρέπει να επαναποστειρωθεί.	ISO 15223-1, Ενότητα 5.2.6	Ιατροτεχνολογικά προϊόντα – Σύμβολα που πρέπει να χρησιμοποιούνται με πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται από τον κατασκευαστή – Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις.
Να μην επαναποστειρώνεται		ISO 7000-2608	Ιατροτεχνολογικά προϊόντα — Σύμβολα που πρέπει να χρησιμοποιούνται με τις ετικέτες ιατροτεχνολογικών προϊόντων και πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται.
	Υποδηλώνει ιατροτεχνολογικό προϊόν το οποίο δεν έχει υποβληθεί σε διαδικασία αποστείρωσης.	ISO 15223-1, Ενότητα 5.2.7	Ιατροτεχνολογικά προϊόντα – Σύμβολα που πρέπει να χρησιμοποιούνται με πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται από τον κατασκευαστή – Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις.
Μη αποστειρωμένο		ISO 7000-2609	Ιατροτεχνολογικά προϊόντα — Σύμβολα που πρέπει να χρησιμοποιούνται με τις ετικέτες ιατροτεχνολογικών προϊόντων και πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται.
	Υποδηλώνει ιατροτεχνολογικό προϊόν το οποίο έχει υποβληθεί σε διαδικασία αποστείρωσης.	ISO 15223-1, Ενότητα 5.2.1	Ιατροτεχνολογικά προϊόντα – Σύμβολα που πρέπει να χρησιμοποιούνται με πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται από τον κατασκευαστή – Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις.
Προϊόν το οποίο έχει υποβληθεί σε διαδικασία αποστείρωσης		ISO 7000-2499	Ιατροτεχνολογικά προϊόντα — Σύμβολα που πρέπει να χρησιμοποιούνται με τις ετικέτες ιατροτεχνολογικών προϊόντων και πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται.
	Υποδηλώνει ιατροτεχνολογικό προϊόν το οποίο έχει αποστειρωθεί με τη χρήση ακτινοβολίας.	ISO 15223-1, Ενότητα 5.2.4	Ιατροτεχνολογικά προϊόντα – Σύμβολα που πρέπει να χρησιμοποιούνται με πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται από τον κατασκευαστή – Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις.
Αποστειρωμένο με τη χρήση ακτινοβολίας		ISO 7000-2502	Ιατροτεχνολογικά προϊόντα — Σύμβολα που πρέπει να χρησιμοποιούνται με τις ετικέτες ιατροτεχνολογικών προϊόντων και πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται.
	Υποδηλώνει ιατροτεχνολογικό προϊόν το οποίο έχει αποστειρωθεί με τη χρήση άσηπτων τεχνικών.	ISO 15223-1, Ενότητα 5.2.2	Ιατροτεχνολογικά προϊόντα – Σύμβολα που πρέπει να χρησιμοποιούνται με πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται από τον κατασκευαστή – Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις.
Αποστειρωμένο με τη χρήση άσηπτων τεχνικών		ISO 7000-2500	Ιατροτεχνολογικά προϊόντα — Σύμβολα που πρέπει να χρησιμοποιούνται με τις ετικέτες ιατροτεχνολογικών προϊόντων και πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται.
	Υποδηλώνει ιατροτεχνολογικό προϊόν το οποίο έχει αποστειρωθεί με τη χρήση αιθυλενοξειδίου.	ISO 15223-1, Ενότητα 5.2.3	Ιατροτεχνολογικά προϊόντα – Σύμβολα που πρέπει να χρησιμοποιούνται με πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται από τον κατασκευαστή – Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις.
Αποστειρωμένο με τη χρήση αιθυλενοξειδίου		ISO 7000-2501	Ιατροτεχνολογικά προϊόντα — Σύμβολα που πρέπει να χρησιμοποιούνται με τις ετικέτες ιατροτεχνολογικών προϊόντων και πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται.



Συνηθέστερα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

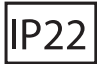



Γλωσσάρι των συνηθέστερων χρησιμοποιούμενων συμβόλων στις συσκευασίες και επισημάνσεις ιατροτεχνολογικών προϊόντων της DeRoyal

σύμβολο	επεξηγηματικό κείμενο	πρότυπο αναφοράς	τίτλος προτύπου
	Υποδηλώνει ιατροτεχνολογικό προϊόν το οποίο έχει αποστειρωθεί με τη χρήση ατμού ή ξηράς θερμότητας.	ISO 15223-1, Ενότητα 5.2.5	Ιατροτεχνολογικά προϊόντα – Σύμβολα που πρέπει να χρησιμοποιούνται με πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται από τον κατασκευαστή – Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις.
Αποστειρωμένο με τη χρήση ατμού ή ξηράς θερμότητας		ISO 7000-2503	Ιατροτεχνολογικά προϊόντα — Σύμβολα που πρέπει να χρησιμοποιούνται με τις ετικέτες ιατροτεχνολογικών προϊόντων και πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται.
	Υποδηλώνει την ύπαρξη δυνητικών βιολογικών κινδύνων που συνδέονται με το ιατροτεχνολογικό προϊόν.	ISO 15223 5.4.1	Ιατροτεχνολογικά προϊόντα – Σύμβολα που πρέπει να χρησιμοποιούνται με πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται από τον κατασκευαστή – Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις.
Βιολογικοί κίνδυνοι		ISO 7000-0659	Ιατροτεχνολογικά προϊόντα — Σύμβολα που πρέπει να χρησιμοποιούνται με τις ετικέτες ιατροτεχνολογικών προϊόντων και πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται.
	Συσκευή με διπλή μόνωση	IEC 60417-5172	Γραφικά σύμβολα για χρήση σε εξοπλισμό.
Συσκευή με διπλή μόνωση			
	Εφαρμοζόμενο εξάρτημα τύπου BF	IEC 60417-5333	Γραφικά σύμβολα για χρήση σε εξοπλισμό.
Εφαρμοζόμενο εξάρτημα τύπου BF			
	Κατατάσσει και αξιολογεί τον βαθμό προστασίας που παρέχεται από το περίβλημα/κέλυφος της ηλεκτρικής συσκευής. • Προστασία από στερεά σώματα > 12,5 mm • Προστασία από νερό που ψεκάζεται από γωνία έως και 15 από τον κάθετο άξονα	IEC 60529* *(δεν έχει αριθμό αναφοράς για 60601-1 [2005] σ.645)	Γραφικά σύμβολα για χρήση σε εξοπλισμό.
Κωδικός IP, Διεθνής σήμανση προστασίας			
	Ασφαλές για μαγνητική τομογραφία	ASTM F2503	Τυπική πρακτική σήμανσης ιατροτεχνολογικών προϊόντων και άλλων ειδών για ασφάλεια στο περιβάλλον μαγνητικού συντονισμού.
Ασφαλές για MR			
	Ασφαλές για μαγνητική τομογραφία υπό προϋποθέσεις	ASTM F2503	Τυπική πρακτική σήμανσης ιατροτεχνολογικών προϊόντων και άλλων ειδών για ασφάλεια στο περιβάλλον μαγνητικού συντονισμού.
Ασφαλές για MR υπό προϋποθέσεις			
	Επισφαλές για μαγνητική τομογραφία	ASTM F2503	Τυπική πρακτική σήμανσης ιατροτεχνολογικών προϊόντων και άλλων ειδών για ασφάλεια στο περιβάλλον μαγνητικού συντονισμού.
Επισφαλές για MR			



Συνηθέστερα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

Γλωσσάρι των συνηθέστερων χρησιμοποιούμενων συμβόλων στις συσκευασίες και επισημάνσεις ιατροτεχνολογικών προϊόντων της DeRoyal

σύμβολο	επεξηγηματικό κείμενο	πρότυπο αναφοράς	τίτλος προτύπου
 ΑΗΗΕ	Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού	EN 50419	Τυπική πρακτική σήμανσης ιατροτεχνολογικών προϊόντων και άλλων ειδών για ασφάλεια στο περιβάλλον μαγνητικού συντονισμού.
 Μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες	Μη ιοντίζουσες ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες	IEC 60417 REF 5140	Τυπική πρακτική σήμανσης ιατροτεχνολογικών προϊόντων και άλλων ειδών για ασφάλεια στο περιβάλλον μαγνητικού συντονισμού.
 Δεν περιέχει DEHP	Υποδεικνύει ότι τα υλικά κατασκευής δεν περιλαμβάνουν φθαλικούς πλαστικοποιητές DEHP	BS EN 15986 Παράρτημα Β	Σύμβολο προς χρήση στην επισήμανση των ιατροτεχνολογικών προϊόντων – Απαιτήσεις για την επισήμανση ιατροτεχνολογικών προϊόντων που περιέχουν φθαλικές ενώσεις.
 Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων	Υποδεικνύει ότι το στοιχείο είναι ιατροτεχνολογικό προϊόν.	ISO 15223 – 1, Ενότητα 5.7.7	Ιατροτεχνολογικά προϊόντα – Σύμβολα που πρέπει να χρησιμοποιούνται με πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται από τον κατασκευαστή – Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις.